



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КРЕСЛО  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Комфорт  
Замечательный дизайн  
Отличная маневренность

**BORCAD**<sup>®</sup>

[www.borcad.ru](http://www.borcad.ru)

# Замечательный дизайн Комфорт

Отличная маневренность

ДИЗАЙН



Автором дизайна многофункционального кресла SELLA является академический скульптор Йири Шпанихел



Многофункциональное кресло SELLA благодаря комбинации функций, эргономически правильно выбранных пропорций и приятному дизайну приносит ряд преимуществ и облегчает работу как пациенту ограниченному в передвижении, так и медицинскому персоналу. Малый вес, высокая маневренность и удобство посадки делают этот продукт прекрасным помощником в домах престарелых, санаториях, больницах и в частном лечебном секторе.





КОМФОРТ  
РАДИ ЖИЗНИ



Мобилизация относится к физически наиболее тяжелым задачам в здравоохранении. Гидравлический подъемный механизм, способный наклонить сиденье и установка подлокотников в положение для отталкивания руками полностью исключают физическую нагрузку для медицинского персонала, необходимую для манипуляции с пациентом.



Установка по высоте облегчает работу медицинскому персоналу, т.к. позволяет легко переместить пациента с кресла на кровать.

При наступании на подножку безопасности кресло автоматически затормаживается.



Ассистенция при вставании



Установка высоты кресла

Для удобного перемещения по небольшим и узким помещениям больше подойдет кресло с маленькими колесами. Поворот колес вокруг своей оси улучшает маневрируемость с креслом на маленьком пространстве.





Для перемещений на улице или по неровным поверхностям лучше подходит кресло с большими колесами.

Удобная и простая установка спинки сиденья самим пациентом повышает его самостоятельность и независимость.



Также можно провести, к примеру, любое несложное обследование пациента непосредственно на кресле.

Конструкция кресла SELLA обеспечивает медицинскому персоналу полную доступность.



Удобную транспортировку обеспечивает как малый вес кресла, так и эргономичное управление.




Центральный тормоз повышает безопасность пациента и простоту манипулирования для персонала.



## Очистка



## Принадлежности

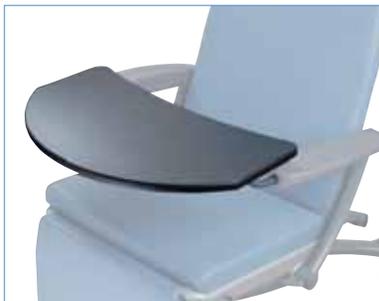

SLA-ZP-001 Столик



SLA-ZP-018 Складывание поверхности пациентом



SLA-ZP-007 Подлокотник для забора крови



SLA-ZP-011 Боковые опоры (2 шт.)



SLA-ZP-005 Карман




SLA-ZP-019 Держатель пакетов для мочи



SLA-ZP-010 Подголовник большой



SLA-ZP-023 Фиксация столика в подлокотнике

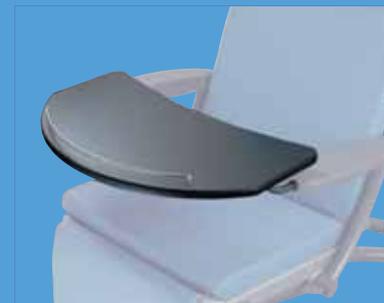

SLA-ZP-024 Столик с перегородкой



SLA-ZP-020 Держатель столика



SLA-ZP-003 Стойка капельницы



Возможность независимой установки  
подножного сегмента



SLA-ZP-002 Держатель стойки  
капельницы



SLA-ZP-006 Независимая установка  
подножного сегмента




# Технические параметры



SLA – AX		Фиксированное шасси, большие передние колеса
SLA – BX		Подъемное шасси, большие передние колеса *
SLA – CX		Фиксированное шасси, вращающиеся малые передние колеса
SLA – DX		Подъемное шасси, вращающиеся малые передние колеса *
SLA – IX		Подъемное шасси, большие передние колеса, ассистенция при вставании *
SLA – JX		Подъемное шасси, вращающиеся малые передние колеса, ассистенция при вставании *

Габаритные размеры	
Общая длина в базовом положении	910 мм
Общая длина в лежачем положении	1610 мм
Общая ширина	685 мм
Максимальная высота подъема (диапазон настройки)	255 мм *
Угол установки спинки сиденья	17° - 70°
Угол установки подножного сегмента	12° - 90°
Угол установки подлокотника	-25°, 0°, 25°, 90°
Максимальная нагрузка	
Максимальный вес пациента	150 кг

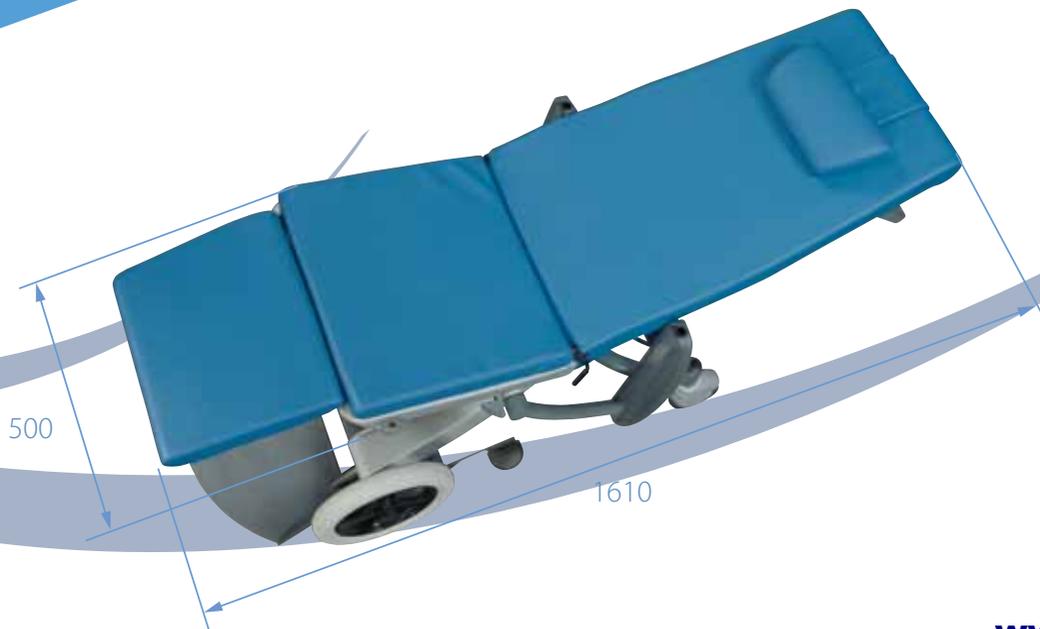

# Цветовые решения



В - Балтийский



Д - Зеленый




С - Кремовый



А - Персиковый

## Великолепная вариабильность

Высокая вариабильность  
поверхностей позволяет  
установить кресло согласно  
индивидуальных потребностей  
пациента.

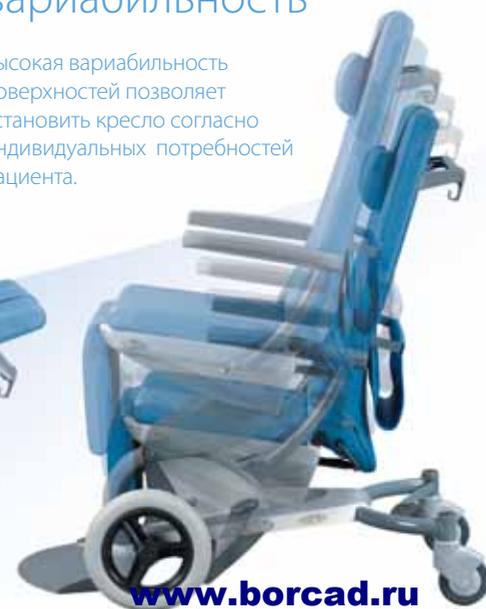

Официальный дистрибьютор BORCAD в Российской Федерации  
ООО "МЕДЭК Инструмент Групп"  
108811, г.Москва, г.Московский, ул.Хабарова, д.2, офис 320  
тел.: +7(495)755-55-12, 755-55-72, mail@borcad.ru, info@borcad.ru  
СЕРВИС продукции BORCAD в РФ: +7(495)240-59-04, service@borcad.ru

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КРЕСЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



BORCAD cz s.r.o.

CZ – 739 45 г.Фричовице 673  
Тел.: +420 558 640 631  
Факс: +420 558 640 629  
e-mail: borcad@borcad.cz  
www.borcad.cz

Дистрибьютор:



[www.borcad.ru](http://www.borcad.ru)